

Гарантия

Гарантийные обязательства

Бесплатное гарантийное обслуживание изделия в течение гарантийного срока обеспечивается при наличии у потребителя чека или иных документов на приобретение изделия, а также при соблюдении потребителем правил эксплуатации изделия и требований безопасности описанных в данной инструкции, прилагаемой к изделию.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

Изделие, поврежденное в результате: природных явлений; попадания в изделие посторонних предметов или жидкостей; деятельности животных; неправильной установки, эксплуатации, хранения или транспортировки изделия; механических воздействий; несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, неуполномоченными на проведение указанных действий.

Сохраняйте чек на приобретенное изделие.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь в пункт приема по адресу : г. Москва, Улица Профсоюзная д.2/22, тел: (499) 394-46-62, Эско Сервис
Актуальную информацию о сервисных центрах вы всегда сможете узнать на сайтах: www.watershot.ru

Любые вопросы по сервисному обслуживанию задавайте по адресу электронной почты: info@watershot.ru

« _____ » _____ 201__ г.

Заключение сделки купли-продажи означает согласие покупателя (потребителя) с тем, что изделие было проверено в присутствии покупателя (потребителя), претензий по внешнему виду и комплектности он не имеет, а также с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

www.watershot.ru

WATER
SHOT
워터샷 SL-815

Руководство пользователя



SEOHUNG
Mechanism Techniquer

1. Меры предосторожности

* **Обязательно прочтите данное руководство перед использованием**

- Данные меры предосторожности позволят безопасно и правильно использовать устройство.
- Храните данное руководство пользователя в легкодоступном месте и обращайтесь к нему в случае возникновения вопросов.

⚠ Внимание: Опасность получения травм при неверном использовании.

⚠ Внимание!

- Время и частоту пользования смотрите в данном руководстве.
- Перед использованием проверьте соответствие значений напряжения устройства и напряжения в месте пользования.
 - Рабочее напряжение устройства: AC 220V
- Не сгибайте, не скручивайте и не тяните провод. Не вставляйте вилку с силой. (Во избежании возгорания, удара током, ожогов.)
- Незамедлительно прекратите использование устройства и выдерните вилку из розетки в случае:
 - Повреждения, изменения формы или нагрева провода или вилки. (Для предупреждения возгорания, удара током)
 - Если вилка, вставленная в розетку, расшаталась.
 - В случае обнаружения поломки
 - При наличии признаков поломки

⚠ Внимание!

- Не используйте зарядное устройство в ванной и не мойте его водой. **Предупреждение удара током.**
- Запрещается пользоваться детям, людям, которые не способны пользоваться устройством в одиночку, а также лицам, с пониженной чувствительностью полости рта. **Может стать причиной травм.**
- Не используйте в иных целях, кроме чистки полости рта. При попадании струи воды в горло, нос, ухо, может быть получена травма. **Лица, проходящие лечение полости рта или лица с тяжелой формой пародонтоза должны проконсультироваться у врача.**
- Не ставьте в зарядное устройство монеты, скрепки, булавки и другие металлические предметы. **Может стать причиной нагревания и возгорания.**
- После чистки полости рта, всегда очищайте устройство, используя **чистую теплую водопроводную воду.**
- После пользования, обязательно, удаляйте воду из емкости для воды, **после чего включите на 2-3 секунды**, чтобы полностью удалить воду из устройства.
- Продолжительное использование загрязненного устройства может способствовать возникновению кариеса и размножению микробов, что может причинить вред здоровью. **Может стать причиной появления запаха изо рта и поломки.**
- В случае неиспользования дольше недели, выньте вилку из розетки. **Может стать причиной удара током, возгорания.**
- Не наливайте в емкость воду, температура которой выше 40°C. **Может стать причиной получения ожогов.**
- Не оставляйте устройство во включенном состоянии. **(Может стать причиной поломки.)**

⚠ Внимание!

- Не помещайте в емкость для воды соль, зубную пасту или химические вещества. **Может вызвать растрескивание внешней или внутренней части устройства.**
- Не используйте устройство при отсутствии воды в емкости для воды. **(Может стать причиной поломки)**
- Не позволяйте никому разбирать, переделывать, чинить устройство, кроме определенных специалистов. **(Может стать причиной поломки.)**
- Не роняйте устройство с большой высоты и не подвергайте его сильным ударам. **(Если устройство подверглось падению или ударам, используйте его снова после проверки.)**
- Выньте вилку из розетки после использования зарядного устройства. **Есть опасность удара током.**
- Для ремонта (замены аккумулятора) устройства обратитесь в пункт приобретения, или пункт обслуживания потребителей данной компании. **(Может стать причиной возгорания, удара током, получения травмы.)**

*** Сообщаем что:**

- Даже в случае здоровых десен, в первое время пользования может идти кровь. **Кровотечение, возникшее из-за раздражения десен, которого ранее не было, прекратится в течение 1-2 недель. Если кровотечение не прекратится в течение 2 недель, возможно, причиной являются болезни десен (пародонтоз и т.д.). Прекратите пользование устройством и обратитесь за консультацией к врачу.**

4


Содержание

1. Меры предосторожности.....1 стр.
2. Конструкция ирригатора.....6 стр.
3. Правила пользования ирригатором.....7 стр.
4. Уход и хранение.....10 стр.
5. Гарантийное свидетельство.....12 стр.

Наименование: Ирригатор для полости рта
Торговая марка: WaterShot
Модель: SL-815
Производитель: SEOHUNG MEGATECH CO., LTD, Южная Корея, Кангвон-до, Вонджу-си, Мунмак-ып, Донхва-ри, 1667-7
Класс защиты от воды: IPX7
Вес: 430 г.
Напряжение: AC 220V/60Hz/38mA
Сделано в Южной Корее

5


2. Конструкция ирригатора

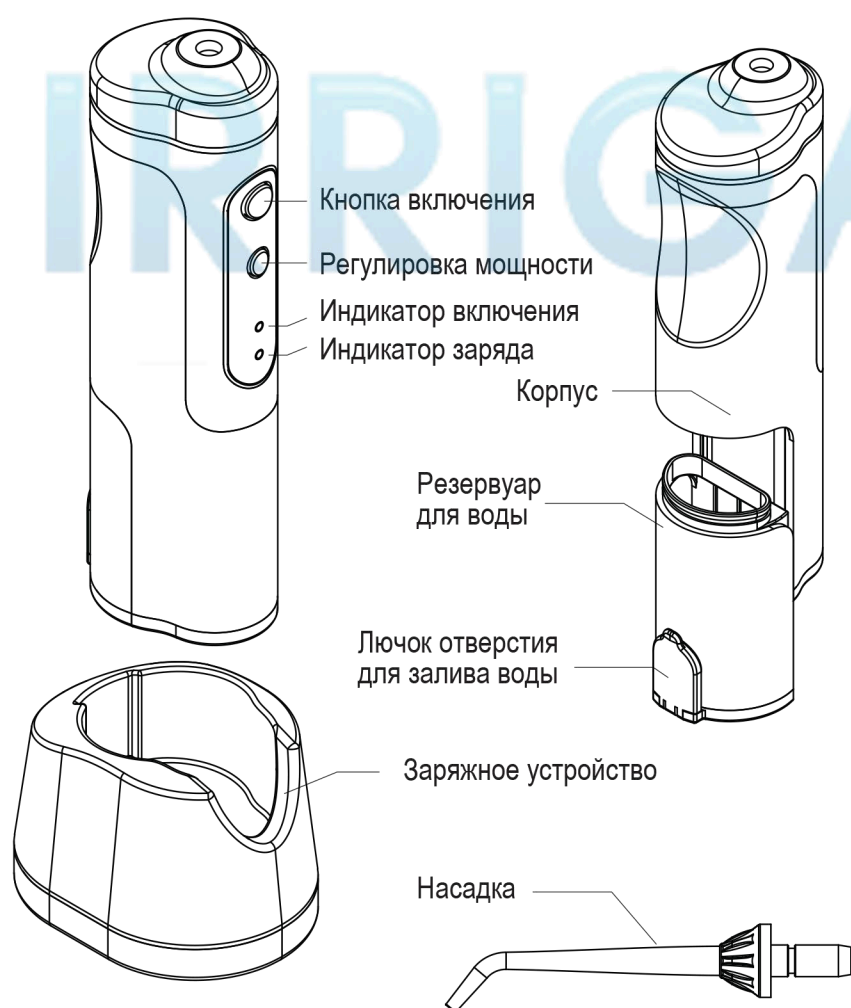


6

3. Правила пользования ирригатором

1. Установите насадку в ирригатор.
(задвиньте до упора пока насадка не войдет в паз)

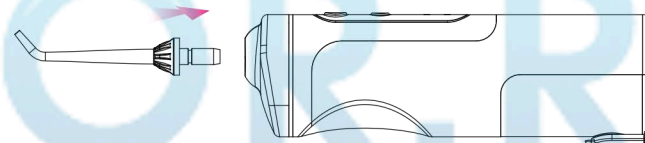


2. Откройте лючок резервуара, налейте холодную или теплую воду (не выше 40°C) до наполнения резервуара.

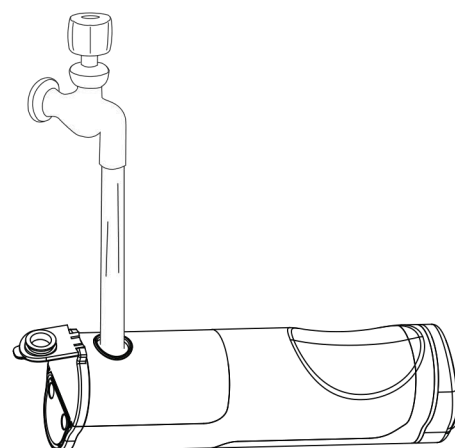


7

3. Правила пользования ирригатором

3. Плотно закройте лючок

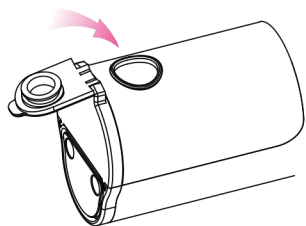

4. Наклонитесь над раковиной, направив насадку в сторону зубов

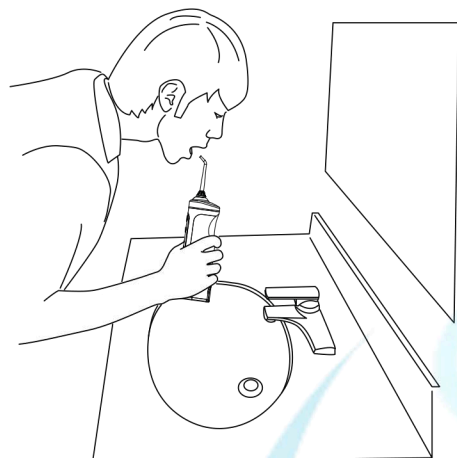

5. Нажмите кнопку включения.

- Полного резервуара хватает на 35 секунд в интенсивном режиме и 60 секунд при пульсирующем мягком режиме.
- Не прикасайтесь насадкой к зубам и деснам.
- Регулируйте интенсивность кнопкой регулировки мощности.

* При первом применении, заполните емкость для воды и, нажав кнопку включения, протестируйте работу устройства.

8

3. Правила пользования ирригатором

6. Вращая насадку вы можете добиться, чтобы струя попадала на все участки полости рта.



7. После использования выключите устройство, нажав на кнопку включения, не вынимая сопло изо рта.


- Данное устройство разработано для чистки полости рта. Ни в коем случае не используете его для чистки ушей, глаз и других частей.

9

4. Уход и хранение


Чистка корпуса

1. Выключите ирригатор и снимите насадку

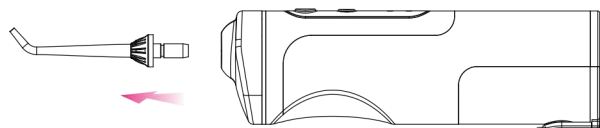

- Не используйте воду, температура которой выше 50°C.
- Мойте корпус только водой или нейтральными чистящими средствами. Не используйте абразивные чистящие средства (уксус, карбонатные чистящие средства и т.д.).

2. Протирайте корпус ирригатора тряпкой.

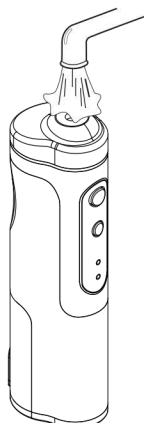


- Не держите устройство долгое время в воде.
- После промывания водой протирайте сухой тряпкой.

10

4. Уход и хранение

Чистка резервуара

3. Отделите резервуар от корпуса и промойте его водой.

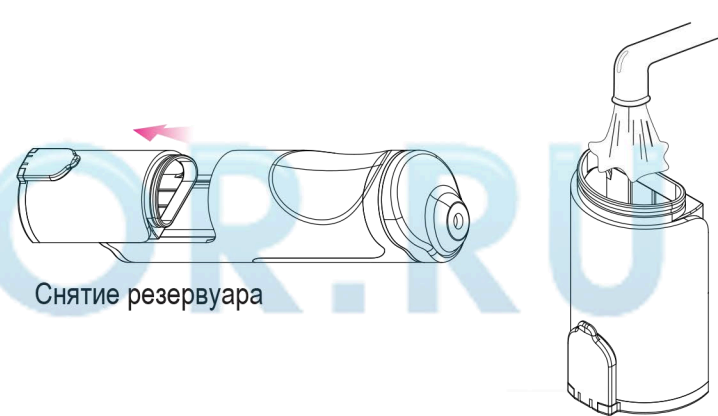

- При ежедневном использовании 1 раз в неделю промывайте резервуар. После мойки дайте резервуару высохнуть.

Чистка зарядного устройства

4. Для удаления трудно выводимых пятен протирайте влажной тряпкой с использованием нейтральных чистящих средств.

- Используйте только нейтральные чистящие средства.
- Не протирайте отбеливателем, бензином, спиртом и другими химическими веществами.
- Один раз в 6 месяцев протирайте вилку сухой тряпкой.
- Не промывайте водой и не опускайте в воду зарядное устройство.

11