

megaten_Dorothy_guide (3).pdf

Реклама18+

C++

Курс "Программирование на C++"

Обучаем разработчиков с нуля в Яндекс.Практикуме. 30 часов практики – бесплатно.
 praktikum.yandex.ru



www.megatensonic.ru
 info@megatensonic.ru

MEGA TEN Dorothy

Зубная щетка MEGA TEN является совместной разработкой с Осакими подгигиеническими стоматологическими университетами. Перед использованием зубной щетки ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте настоящие руководств на протяжении всего срока использования изделия.

Описание изделия

При чистке зубов верхнюю крышку можно соединить с нижней металлической накладкой, что позволяет увеличить площадь заката рукоятки щетки.

При хранении и транспортировке При использовании изделия

1) Комплектация



2) Инструкции по использованию изделия

• При однократном нажатии кнопки Вкл/Выкл загорается светодиодный индикатор и запускается мягкий режим вибрации, при двухкратном нажатии – нормальный режим вибрации.

• Пользователь может установить режим вибрации по своему предпочтению.

• При чистке зубов пользователь может соединить верхнюю крышку с нижней металлической, что позволит увеличить площадь заката рукоятки щетки.

3) Чистка зубов

• Для достижения наилучшего эффекта зубы рекомендуется чистить движениями из стороны в сторону и круговыми движениями.

• 30-секундный таймер поможет Вам определить время, необходимое для чистки каждой из 4-х секций зубов во рту (по 30 секунд на каждую секцию), и закончить чистку зубов ровно через 2 минуты.

4) Очистка и хранение изделия

• Используйте межзубную щетку-ершик, зубочистку или другую сменную насадку для удаления остатков.

• Чтобы удалить частицы пищи или иные остатки, оставшиеся после чистки зубов, промойте изделие под струей теплой воды, протирая щетинки пальцем, а затем сильно встряхните.

• Средний срок службы насадки составляет приблизительно 3 месяца.

• Замените насадку, если съемная часть со щетинками держится непрочно или изнасилась из-за контакта с зубами.

5) Общие меры предосторожности

• В случае возникновения дискомфорта или боли, немедленно прекратите использование изделия.

• Слишком сильное сжатие щетки зубами может способствовать деформации насадки и выпадению щетинок.

• Не используйте щетку, если на ней имеются повреждения (насадки или корпуса)

• Изделие полностью водонепроницаемо, однако не оставляйте его погруженным в воду, что может привести к поломке. Производите замену батареи только сухими руками.

• Ударные воздействия на кнопку Вкл/Выкл могут привести к повреждению кристалла.

• В комплектацию изделия входит подлинный кристалл Swarovski.

6) Информация об изделии

Наименование изделия	MEGA TEN DOROTHY	Комплекция	Страна изделия
Размеры изделия	170 x 22,5 мм	Батарейка	USA
Видная деталь	Дизайн Труфф	Переносимость	Вода — 80 °C Воздух — 80 °C
Режимы вибрации	Мягкий режим: 18 000 раз в минуту (в 10%) Нормальный режим: 18 000 раз в минуту (в 10%)	Дата производства	Производство осуществляется на завод в Китае
Батарея	Насадка: P21 / Батарея: AGC-элемент (Встроенная P21)		
Гарантия и обслуживание	1 год с даты приобретения (30 дней для адреса)		
Страна производства	Китай: Жэньцзянь в Шэньчжоу; Фабрика комплектующих: Жэньцзянь в Чэньчжоу; Фабрика сборки: Жэньцзянь в Чэньчжоу; Фабрика сборки: Жэньцзянь в Чэньчжоу		
Производитель	ООО «Мегатенсоник», С.П.О.О.		
Сертификационный номер (КЭ)	R-REM-vvt-MB-AS8008 (MEGA TEN_Adult Sanic Toothbrush)		

www.megatensonic.ru

7) Гарантия и обслуживание

Для получения подробной информации по данным вопросам обращайтесь к продавцу.

✉ info@megatensonic.ru

Гарантийный срок: 1 год с даты приобретения (90 дней для щетинок)


Не являются гарантийными случаями:

Избегайте ударов щетки о твердые поверхности. Повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования или использования без соблюдения общих мер предосторожности.

Естественный износ, включая царапины, трещины, обесцвечивание, выцветание.


• Настоящее изделие типа «звучающая зубная щетка» представляет собой щетинную щетку 360° с фиксированными щетинками.

• Зубные щетки классифицируются как средства гигиены, в силу чего в соответствии с законом о защите прав потребителей распродажное изделие возврату не подлежит.

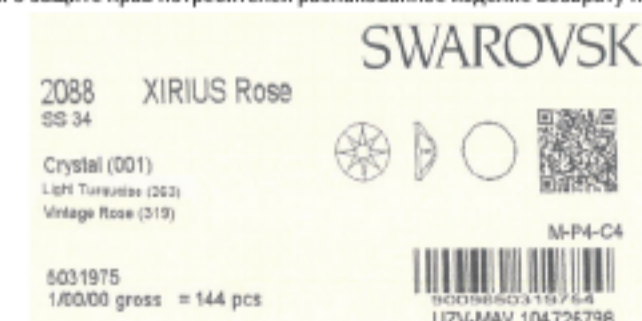


*Комплектация изделия включает КОМПОНЕНТЫ производства Swarovski.

Реклама0+

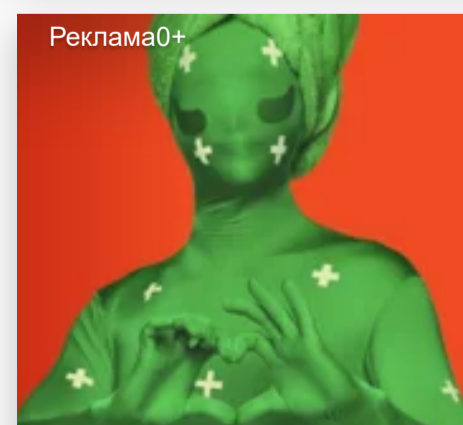

Станьте видеоблогером...

Среди блогеров Дзена не хватает вас. Заведите видеоблог. 0+ zen.yandex.ru

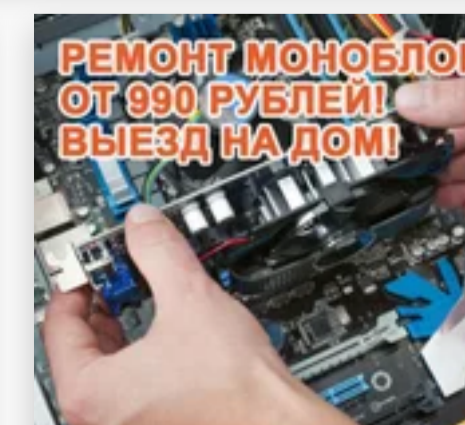


Ремонт моноблоков...

Качественный ремонт моноблоков Москва! Бесплатный выезд мастера на дом! От 990... mrgz.me



Топ 7 электрических...

Рейтинг популярных электрических зубных щеток в 2020 году. Описание. Выводы! revizzoro.ru

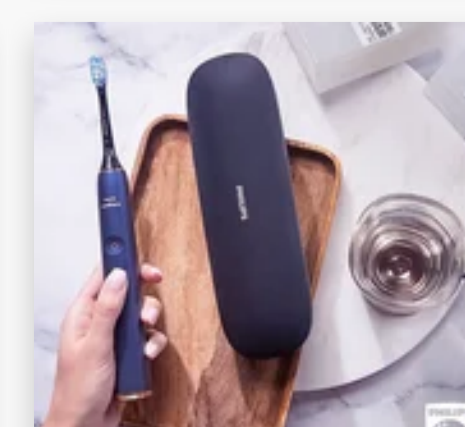

Зубная щетка Philips Sonicare

Клинически доказано - удаляет больше налёта, чем другие щетки philips.ru