


## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не погружайте зарядное устройство в воду или любую другую жидкость;
2. Если зарядное устройство не работает должным образом или есть другие признаки повреждения, немедленно прекратите его использование;
3. Не модифицируйте, не разбирайте и не ремонтируйте этот продукт самостоятельно;
4. Этот продукт можно использовать только для чистки зубов;
5. Зубная щётка является продуктом личной гигиены, пожалуйста, не делитесь ею с другими;
6. Если у вас была операция в полости рта или на дёсны в последние 2 месяца, перед использованием проконсультируйтесь со стоматологом.

## СПОСОБ ЗАРЯДКИ УСТРОЙСТВА (Примечание: полная зарядка занимает 16 часов)

1. Если при включении щётки на ней горит красный индикатор, значит щётка разряжена;
2. Поместите щётку в зарядную подставку. Индикатор во время зарядки будет мигать;
3. Когда щётка полностью зарядится, зелёный индикатор будет гореть непрерывно.

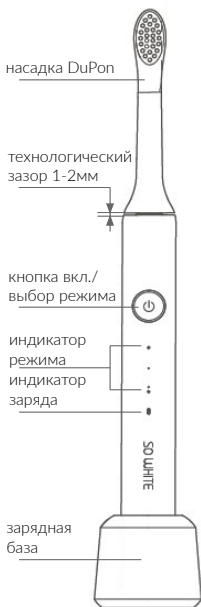

## СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Смочите щётку и выдавите нужное количество зубной пасты. Поместите щётку в полость рта под углом 45 градусов к поверхности зубов.
2. Нажмите кнопку включения, осторожно прижимая, плавно водите зубной щёткой по поверхности зубов;
3. Нажмите кнопку включения во время чистки, чтобы переключить на другой режим:
  - стандартный режим: глубокое очищение рта, подходит для большинства людей;
  - мягкий режим: для людей с чувствительными зубами/дёснами или впервые использующих электрические зубные щетки;
  - Режим массажа: чередование колебаний на разных частотах каждую минуту (совмещает стандартный и мягкий режимы)
4. Во время процесса чистки зубная щётка вибрирует каждые 30 секунд, что сигнализирует о необходимости сменить зону чистки. Щётка автоматически остановится через две минуты. Если вам нужно продолжить чистку, включите щётку снова;
5. После каждого использования ополаскивайте зубную щётку чистой водой.

\* Первое использование электрической зубной щетки может вызвать дискомфорт: повышенную чувствительность, зуд, кровоточивость десен и т. д.

Дискомфорт исчезнет примерно через две недели, если нет, пожалуйста, прекратите использование и обратитесь к стоматологу.



800276-RUZ002-EX304