

REVYLINE



RL 080

**SONIC ELECTRIC TOOTHBRUSH
DOUBLE OSCILLATION**


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
С ДВОЙНЫМИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Перед первым применением электрической щетки RL 080 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Технические характеристики	4
Комплектация	4
Меры предосторожности	5
Предупреждения медицинского характера	6
Зарядка аккумулятора	6
Насадки в комплекте	7
Вкл/выкл прибора	7
Сенсорные функции	8
Режим блокировки/разблокировки	8
Настройки режимов работы	9-11
Процесс чистки	12
Уход за зубной щеткой	13
Транспортировка, хранение и утилизация прибора	13
Гарантия	14

Если у вас остались вопросы,
обратитесь в сервисный центр:

 **8 (800) 775-38-49**

 **www.revyline.ru**

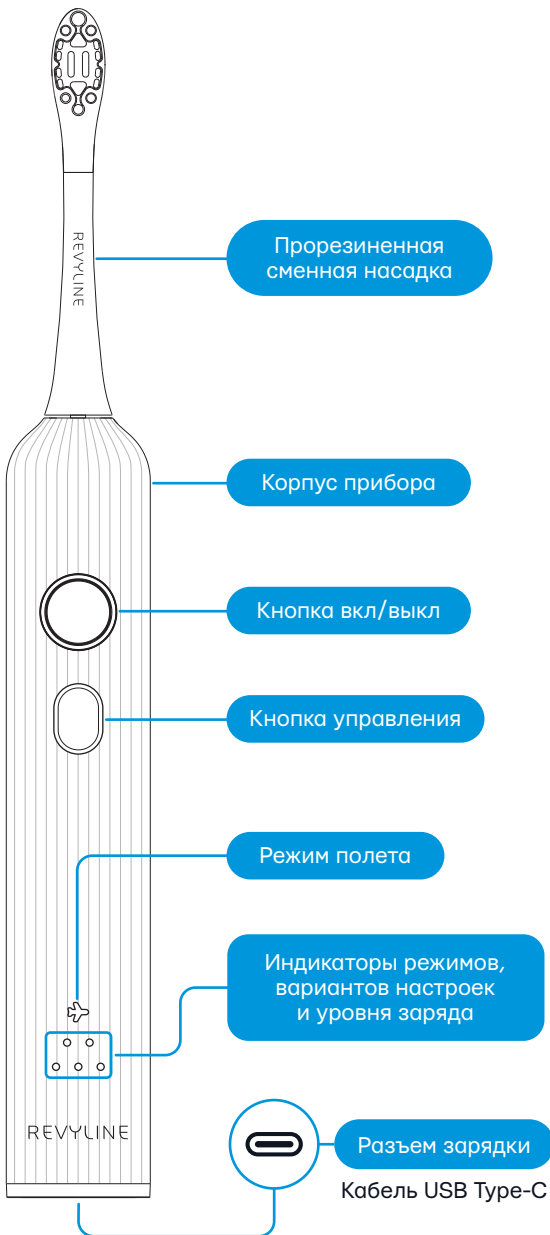

Электрическая зубная щетка с двойными колебательными движениями

Предназначена для эффективной чистки зубов.

- 6 базовых режимов работы
- 3 продвинутых режима работы (5 вариантов настроек в каждом)
- Частота колебаний щетинок – 31 000 в мин.
- Диапазон (угол) колебательных движений щетины – 7–11°.
- Скорость (частота колебаний насадки) – 90–330 в мин.
- Диапазон (угол) колебательных движений насадки – 6–54°.
- Влагозащита – IPX7
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Зарядка через кабель USB Type-C
- Питание – литиево-ионный аккумулятор (2200 mAh)
- Аккумулятор держит заряд до 180 дней
- Потребляемая мощность – 5 Вт
- Номинальное напряжение – 5 В
- Время полной зарядки – 3 ч.
- Гарантия – 2 года
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок щетки
- 2 сменные насадки
- Дорожный футляр на магнитной застежке
- Кабель USB Type-C
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не используйте щетку во время принятия душа.
- Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
- Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
- Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
- Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
- Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
- Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
- Не включайте щетку в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
- Перед использованием щетки удалите из полости рта все съемные конструкции.
- Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
- Электрическую зубную щетку Revyline RL 080 не рекомендуется использовать лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими возможностями, психическими нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.
- Детям до 10 лет следует использовать устройство под присмотром взрослого.
- Небольшое нагревание ручки во время зарядки прибора является нормальным. Но если ручка становится горячей, отключите питание.
- Время от времени следует очищать контакты адаптера питания, чтобы избежать перегрева прибора и поломок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования данного устройства являются нормой. Если кровотечение и дискомфорт сохраняются более одной недели, следует обратиться к стоматологу.

Если в последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости, установили импланты или протезы, то перед началом использования данного устройства следует проконсультироваться с врачом.

Если у вас установлен кардиостимулятор или другие подобные имплантированные устройства, перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА



Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C, который вставляется в разъем, находящийся в основании блока щетки.



Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор щетки. Перед зарядкой щетки убедитесь, что она выключена.



Об уровне заряда аккумулятора можно судить по трем нижним индикаторам на корпусе прибора. Когда горит один индикатор слева – щетка почти разряжена, когда горят левый и средний индикаторы – щетка заряжена наполовину. Три одновременно горящих индикатора свидетельствуют о полной зарядке щетки.




Щетка работает до 180 дней от одного заряда (при двухразовой ежедневной чистке по 2 мин.).

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ

В базовой комплектации зубной щетки RL 080 2 стандартные сменные насадки.

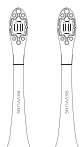


Прорезиненная насадка обеспечивает безопасность чистки.

Внимание! Согласно правилам личной гигиены, совместное использование одной насадки различными пользователями недопустимо.

Установка и замена насадки

Установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпадала с лицевой стороной корпуса щетки.

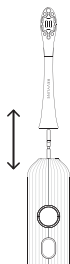

Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для сохранения высокой эффективности гигиены полости рта.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА




Включение и выключение щетки осуществляется нажатием кнопки вкл/выкл.



В щетку встроен таймер, благодаря которому автоматическое отключение питания происходит через 2 минуты работы прибора. Каждые 30 секунд щетка делает небольшую паузу, позволяя сменить зону чистки.

СЕНСОРНЫЕ ФУНКЦИИ

Индикация установленного режима

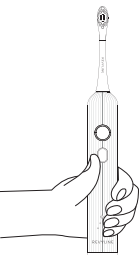

RL 080 сохраняет последний выбранный режим и воспроизводит его при включении. Чтобы понять, в каком режиме будет работать щетка, достаточно обхватить ладонью или двумя пальцами ее корпус в нижней части прибора. От прикосновения загорятся индикаторы, соответствующие ранее выбранному режиму.

Возврат насадки в стартовое положение

Насадка щетки вращается на 360° и оснащена функцией возврата в стартовое положение – когда рабочая поверхность насадки совпадает с лицевой стороной корпуса.



Если рабочая поверхность насадки не совпадает с лицевой стороной корпуса, вернуть насадку в стартовое положение можно с помощью нажатия кнопки вкл/выкл или обхватив щетку ладонью или двумя пальцами в нижней части корпуса. От прикосновения или включения насадка самостоятельно развернется на нужное количество градусов.







РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ

- ➔ Чтобы заблокировать щетку, нажмите на кнопку вкл/выкл и удерживайте ее в течение нескольких секунд до однократного мигания индикатора в виде самолетика на корпусе прибора.
- ➔ Чтобы разблокировать щетку, снова нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл до исчезновения индикации значка «самолетик».

НАСТРОЙКИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

У Revyline RL 080 9 режимов работы.

Базовые режимы:

 Normal	 Light	 Clean
 Clean+	 Polish	 Super

Продвинутые режимы:

 Amplitude	 Angular	 Express
---	---	---


В каждом из трех продвинутых режимов 5 вариантов настроек (15 вариантов чистки).



+





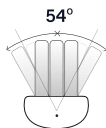



Переход из базовых режимов в продвинутые и наоборот осуществляется следующим образом: одновременно нажмите и удерживайте две кнопки (кнопку включения и кнопку управления) до момента однократного мигания пяти индикаторов на корпусе прибора.




В каждом режиме различные: диапазон колебательных движений щетины, угол движения насадки и скорость (частота колебаний).

Базовые режимы работы

-  **Normal** | Стандартный режим для опытных пользователей
-  **Light** | Мягкий режим для начинающих пользователей и для людей с повышенной чувствительностью зубов
-  **Clean** | Ежедневная чистка, подходит большинству людей
-  **Clean+** | Интенсивная чистка
-  **Polish** | Полировка эмали
-  **Super** | Высокоскоростная чистка для достижения максимального эффекта

Выбор базовых режимов работы

 Включите щетку и последовательным нажатием кнопки управления выберите нужный режим.

Для выбора режима Super удерживайте кнопку управления до тех пор, пока не загорятся все пять индикаторов.

Режимы работы	Угол колебательных движений щетины в градусах	Угол колебательных движений насадки в градусах	Скорость (частота колебаний насадки) в мин.
Normal	9	30	210
Light	7	6	90
Clean	11	30	150
Clean+	11	42	270
Polish	11	0	0
Super	11	54	330

Продвинутые режимы работы



Amplitude

Нажмите на кнопку включения и с ее помощью последовательным нажатием выберите один из трех режимов (верхний ряд индикаторов).



Level 1

Затем последовательным нажатием кнопки управления выберите нужный вариант (нижний ряд индикаторов).

Настройка продвинутых режимов работы



Amplitude

При выборе варианта меняется амплитуда колебаний щетины.

7-8-9-10-11°



Level 1



Level 2



Level 3



Level 4



Level 5



Angular

При выборе варианта меняется угол движений насадки.

6-18-30-42-54°



Level 1



Level 2



Level 3



Level 4



Level 5



Express

При выборе варианта меняется скоростной режим колебательных движений.

90-150-210-270-330 движений в минуту



Level 1



Level 2



Level 3




Level 4



Level 5


ПРОЦЕСС ЧИСТКИ

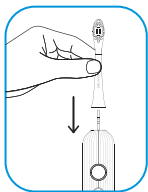


Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и корпусом, так как зазор необходим для возможности осуществления вибрации.




Намочите чистящую головку зубной щетки и нанесенную на нее зубную пасту, прежде чем вы приступите к чистке зубов, это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

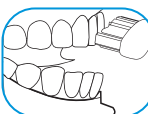

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Включите щетку. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, по необходимости совершая возвратно-вращательные движения.

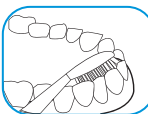

30 сек.

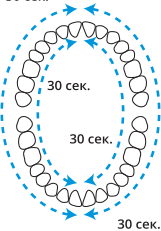

Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре равных условных зоны и очищайте их поочередно.

Поможет в этом 2-минутный таймер, который каждые 30 секунд будет делать короткую паузу, «информируя» таким образом о том, что пора сменить зону чистки. По прошествии двух минут щетка отключится автоматически.

После завершения чистки тщательно прополощите полость рта чистой водой.

УХОД ЗА ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ

- Регулярно очищайте зубную щетку RL 080.
- Промойте чистящую головку насадки, чтобы удалить остатки пасты после чистки, и дайте ей высохнуть на воздухе.
- Не трите щетину, чтобы не деформировать ее.
- Ополосните рукоятку, чтобы удалить загрязнения после чистки, и высушите мягкой тканью.
- Не погружайте зубную щетку в воду.
- Не чистите зубную щетку агрессивным моющим средством и при температуре воды выше +40 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Транспортировка изделий осуществляется любым видом открытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.

Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0 °С до +20 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы и комплектующие.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению, неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям, модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом), нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустранимыми недостатками.
- На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

REVYLINE

главный секрет вашей улыбки