

zubnaya-schetka-cs-medica-kids-cs-463.pdf

Это документ с сайта med-serdce.ru

Реклама



Самоучитель Python

Обучаем разработчиков с нуля в Яндекс.Практикуме. 20 часов практики – бесплатно. praktikum.yandex.ru

CS-463_13266_ - 961_692221_07-14-2020.qxd 14.07.2020 11:54 Page 1



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463-B CS-463-G

Благодарим Вас за приобретение электрической зубной щетки CS Medica KIDS CS-463



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем. Гарантийный талон находится в настоящем руководстве по эксплуатации. При покупке требуйте предоставить это заключение: проставив печать продавца и даты продажи.

Данная зубная щетка предназначена для проведения гигиенических процедур рта у детей от 6 до 12 лет.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Предупреждение: Избегайте не полярностью опасные ситуации, размещение которой может привести к серьезной травме.
Зубная щетка не является игрушкой и содержит мелкие детали, которые могут быть проточены ребенком. Храните ее в недоступном для детей месте.
Вне зависимости от степени тяжести повреждений всегда проводите процедуру под контролем взрослых.
Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием устройства, если у Вас наблюдается что-либо из следующего:
- чувствительные зубы или десны;
- недавно проведенная пародонтологическая или стоматологическая хирургическая операция;
- кровотечение десны, связанное с проблемами в ротовой полости.
Перед использованием устройства и протестируйте его со своим стоматологом, если у Вас наблюдаются кровотечения десен после чистки или использования другой зубной щетки.
Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.
Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.


Внимание: Избегайте не полярностью опасные ситуации, размещение которой может привести к незначительной травме, травме средней тяжести или даже смерти.

- Данное устройство предназначено только для ухода за полостью рта человека в домашних условиях.
Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.
Не прикасайтесь зубную щетку к зубам и деснам ребенка случайно и не касайтесь ее какими-либо другими пластиковыми деталями щетки, кроме щетки.
Не чистите одну область в течение продолжительного времени.
Не используйте элементы питания, не указанные для данного устройства. Вставьте элемент питания, соблюдая полярность.
Избегайте элементы питания на зубной щетке, если Вы не собираетесь пользоваться ею в течение длительного времени (от трех и более месяцев).

Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не распыляйте ее и не подвигайте ее резкому ударному воздействию.

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-463 разработана специально для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Благодаря широкому диапазону со специальными характеристиками чистки зубов превращается в увлекательный занятием. Уникальный размер головки и мягкие щетинки обеспечивают бережную чистку десен и зубов.

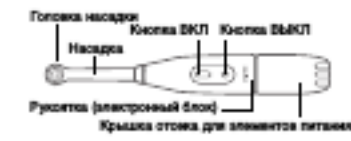

Дополнительно можно приобрести насадку CS Medica PP-01-B и PP-01-G для электрической зубной щетки (в комплекте 2 насадки).

3. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Старайте опек для элемента питания. Удерживая щетку в одной руке, второй рукой всовывайте ее крайнюю опек для элемента питания и закройте ее замок, а затем плотно закройте.

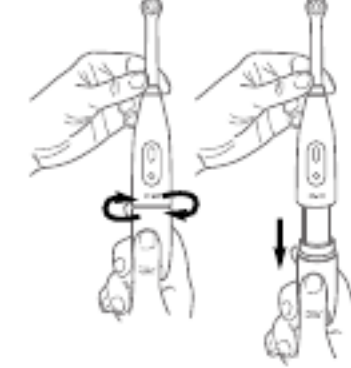


2. При помощи отвертки отверните винт и снимите защитную пленку.



3. Установите два alkaline элемента питания типа AAA, соблюдая полярность, указанную на корпусе внутри отсека для элементов питания.



4. Установите на место защитную пленку и закрепите винт при помощи отвертки.

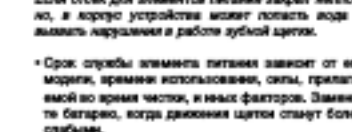


5. Закрутите крышку, совместив направляющие на крышке отсека для элемента питания с ручками.


Внимание: Если отсеки для элементов питания закрыты incorrectly, в корпусе устройства может попасть вода и повлечь повреждение и работу зубной щетки.

- Срок службы элемента питания зависит от его модели, времени использования, типа, прилагаемой во время чистки, и иных факторов. Заменяйте батареи, когда движение щетки станет более слабым.
Время работы от двух alkaline элементов питания составляет около 90 дней, при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 минуты. Так как прилагаемые элементы питания разработаны для демонстрационных целей, щетка может проработать менее 90 дней.
Рекомендуем использовать alkaline (щелочные) элементы питания типа AAA.
Откройте и закройте прижимную колодку полностью для целей, указанных в пункте 3. Установка элемента питания настоящего руководства по эксплуатации. Параллельный срок и срок службы не установлены.

4. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

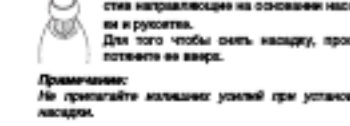

1. Сложите щетку водой и выдвиньте на нее нижнюю часть зубной пасты (располагается в нижней части ручки). После этого поместите щетку в ротовую полость.

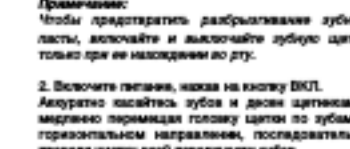

ПРАВИЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ



2. Включите питание, нажав на кнопку ВКЛ. Аккуратно почистите зубки и десны щетинками, медленно передвигая головку щетки по зубам в горизонтальном направлении, последовательно проводя чистку всей поверхности зубов.

3. Промойте насадку под струей воды, выйдете через отверстие 1. Вода, пройдя по насадке, выйдете через отверстие 2.

6. ОЧИСТКА

Очистка насадки: 1. Снимите насадку с ручки. 2. Промойте насадку под углом к струе воды через отверстие 1. Вода, пройдя по насадке, выйдете через отверстие 2.



3. Если установить насадку на корпус и промыть через отверстие 3 во включенном состоянии. Вода, пройдя по насадке, выйдете через отверстие 1.



Очистка ручки (электронного блока): Удалите загрязнения с корпуса щетки мягкой сухой тканью. При необходимости смачивайте ткань в воде или мыльном мыльном растворе. Запрещено тереть щетку. Не погружайте щетку в воду. Не используйте для очистки летучие органические соединения, такие как бензин и растворитель. Это может повредить некачественно краску или привести к повреждению устройства.

7. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Держите зубную щетку в чистоте.
Храните щетку в недоступном для детей месте.
Промойте щетку водой от эфирных масел, мыла и прочих агрессивных веществ.
Если прибор не предполагается использовать в течение продолжительного времени, извлеките элемент питания, промойте щетку в соответствии с пунктом «Очистка» данного руководства и уберите прибор на хранение в защищенное место.
Не кладите тяжелые предметы на прибор во время транспортировки.
Соблюдайте условия хранения и транспортировки, указанные в разделе 8 данного руководства.
Закрепите насадку для щетки на раме одного раза в три месяца.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Table with technical specifications including model name (CS-463-B, CS-463-G), power (1.2 Вт), battery type (2 AAA alkaline), and dimensions.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии: Ручка (электронный блок) – 2 года, Насадка – 3 месяца. Дата продажи: ...

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства зашифрована в серийном номере, который находится на упаковке щетки и имеет структуру YUMNNMM, где YV обозначает последние две цифры года производства, M – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам ноября по октябрю, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNNN – серийный номер модели, а также в LOT номере, который расположен в отсеке для элементов питания и имеет структуру YUMNNM, где YV обозначает последние две цифры года производства, M – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам ноября по октябрю, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNN – номер партии.