


Инструкция для звуковой электрической зубной щетки Наріса




Как поменять батарейку

1 Отделите нижнюю часть корпуса

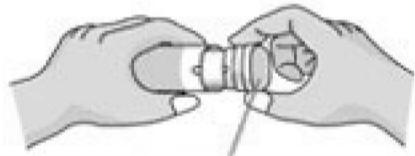

Нижняя крышка


2 Замените батарейку

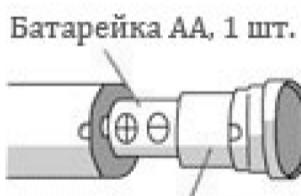

Батарейка AA, 1 шт.


Не допускайте попадание влаги внутрь

3 Закройте корпус

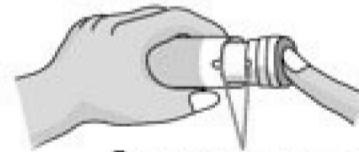

Совместите метки на корпусе

Как правильно чистить зубы

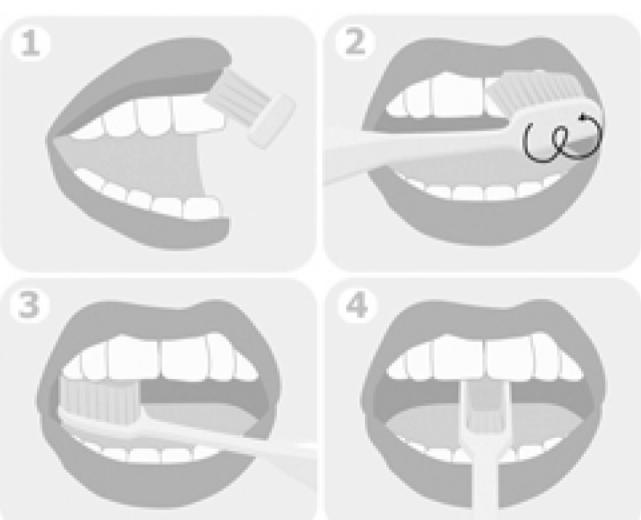

- Когда чистите внешнюю сторону зубов, держите щетку под углом 45° к линии зубов.
- Совершайте щеткой круговые движения вдоль линии десен. Слегка нажимайте на щетку в области десен и межзубных промежутков.
- Возвратно-поступательными движениями очистите жевательную поверхность зубов.
- Внутреннюю поверхность зубов очищайте с помощью мягких вычищающих движений.

Оптимальное время чистки зубов составляет 3 минуты. Рекомендуем чистить зубы не реже двух раз в день.